





Оборудование для контроля качества нефтепродуктов



Термостатирующее оборудование



Общелабораторное оборудование



Оборудование для анализа полимеров





АО «Лабораторное Оборудование и Приборы» - производственно-коммерческая компания, основанная в 1996 г. За годы стабильной и успешной работы компания стала одним из ведущих предприятий, работающих в области комплексного оснащения лабораторий.

Собственное производство лабораторных приборов, мебели и лабораторного оборудования, позволило нам стать лидером среди российских производителей лабораторной продукции.

Как перспективная компания, «ЛОИП» не стоит на месте, регулярно обновляя оборудование, модернизируя сервис и производство, открывая сопутствующие направления и расширяя горизонты рынка лабораторного оборудования в целом.

Сегодня АО «ЛОИП» является одним из самых современных предприятий, занимающихся производством лабораторной продукции в России. Компания обладает всеми необходимыми ресурсами как для разработок и производства нового оборудования, так и для реализации проектов национального масштаба.

Географический охват деятельности «ЛОИП» чрезвычайно широк: вся территории Российской Федерации, стран бывшего СССР, а с 2008 года компания активно продвигается на рынках ближнего и дальнего зарубежья. Система менеджмента качества компании «ЛОИП» соответствует ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001).

1999 год

Разрабатываются первые приборы:

- •термостат серии ЛАБ,
- колбонагреватель,
- шейкер.



2004 ΓοΔ



Приборная продукция серии ЛАБ:

- приборы для контроля качества нефтепродуктов,
- термостатирующая аппаратура,
- общелабораторное оборудование.

2006 год

Запуск серийного производства полуавтоматических аппаратов для определения температуры вспышки: ТВЗ-ЛАБ-01 и ТВО-ЛАБ-01



2009 год



Компания запускает в серийное производство сушильные шкафы и муфельные печи LOIP LF.

СОДЕРЖАНИЕ:

	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ	
	Аппараты для определения фракционного состава	5
	Аппараты для определения температуры вспышки	6
	Аппараты для определения холодного поведения нефтепродуктов	8
	Аппарат для определения давления насыщенных паров	11
	Аппарат для определения концентрации фактических смол	11
	Термостаты для определения физических параметров нефтепродуктов	12
	Вспомогательное оборудование	15
	ТЕРМОСТАТИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
	Прецизионные термостатирующие бани, ультратермостат для поверки и калибровки термометров	17
	Циркуляционные термостаты	18
	Циркуляционные криостаты	20
	ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
	Водяные бани	23
	Колбонагреватели	24
	Нагревательные плиты	25
	Терморегуляторы	26
	Лабораторные печи	26
	Сушильные шкафы	28
	Перемешивающие устройства	30
	Перистальтический насос-дозатор	31
	Автоматический аквадистиллятор	31
(P)	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ПОЛИМЕРОВ	
	Аппарат для определения показателя текучести расплава термопластов	33
	Водяная баня	34
	Комплекты	35
	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ПО МЕТОДУ КЬЕЛЬДАЛЯ	
	Автоматическая установка для разложения по Кьельдалю	37
	Автоматическая установка для дистилляции по Кьельдалю	37
	АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	
	Термостатирующее оборудование	38
	Общелабораторное оборудование	39

2015 год

2012 год

Компания начинает выпуск автоматического оборудования для контроля качества нефтепродуктов.



Рсширение линейки общелабораторного оборудования

• Запуск приборов для анализа полимеров

2020 год

Старт производства новой линейки автоматического оборудования по определению холодного поведения нефтепродуктов



2025 год



- Номенклатура производства: 150 видов изделий
- 25 000 пользователей оборудования LOIP



Оборудование для контроля качества нефтепродуктов АППАРАТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА



АРН-ЛАБ-11

ГОСТ Р ЕН ИСО 3405, ГОСТ Р 53707, ГОСТ ISO 3405, ГОСТ 2177 (методы А и Б), ISO 3405, ASTM D 86

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА СВЕТЛЫХ И ТЕМНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ при атмосферном давлении в соответствии с ГОСТ Р ЕН ИСО 3405, ГОСТ Р 53707, ГОСТ ISO 3405, ГОСТ 2177 (методы A и Б), ISO 3405, ASTM D 86 и другими аналогичными стандартами в диапазоне температур до 400° C.

Аппарат разработан с учетом всех требований стандартов к проведению испытаний, автоматически устанавливает и поддерживает параметры оптимальных условий дистилляции образцов любого типа.

Рекомендован техническим комитетом по стандартизации ТК-31 к применению для определения фракционного состава нефтепродуктов

- Полный автоматический контроль
- Встроенная система охлаждения
- Термостатируемый приемный блок
- Оптическая система измерения объема конденсата
- Автоматическое детектирование каплепадения
- Система автоматического пожаротушения
- Высокоточный термодатчик Pt-100 в стеклянном корпусе
- Встроенный датчик давления
- Низковольтный нагревательный элемент
- •Пожарная сигнализация с оптодетектором
- Цветной ЖК-дисплей

- Сенсорное управление
- Интуитивно понятное меню
- Предустановленные программы перегонки
- Редактор программ
- Функция температурного перехода бани в процессе испытания
- •Градуированный приемный цилиндр
- Надежный фиксатор колбы Энглера
- Подключение к ПК и сети LIMS
- •ПО для обработки результатов
- Подключение внешнего принтера
- •Дистанционное обновление ПО



АРН-ЛАБ-11

Диапозон измерения температуры паров, °С	0 450
Скорость разгонки, мл/мин	0,5 10
Диапазон температур охлаждающей ванны, °С	0 65
Диапазон температур приемной камеры, °С	O T _{okp cp}
Интерфейс	USB, LAN
Потребляемая мощность от сети переменного тока 220В, Вт	2200
Габаритные размеры, мм	495 x 605x 535
Масса, кг	67

АРН-ЛАБ-03

ГОСТ Р ЕН ИСО 3405, ГОСТ Р 53707, ГОСТ ISO 3405, ГОСТ 2177 (методы А и Б), ISO 3405, ASTM D 86

РУЧНОЙ АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА СВЕТЛЫХ И ТЕМНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ при атмосферном давлении в соответствии с ГОСТ Р ЕН ИСО 3405, ГОСТ Р 53707, ГОСТ ISO 3405, ГОСТ 2177 (методы A и Б), ISO 3405, ASTM D 86. Функции автоматизации не предусмотрены.

- Бесступенчатый регулятор мощности нагрева
- Теплоизолированная охлаждающая ванна
- Возможность подключения внешнего криостата/ термостата
- Центрирующее приспособление для термометра
- Зажим для отвода перегонной колбы
- Низковольтный нагревательный элемент
- Трубка холодильника из нержавеющей стали
- Подсветка приемного мерного цилиндра
- Регулятор высоты столика нагревателя
- Подставка для приемного цилиндра
- Регулируемая по высоте передняя опора
- Усиленный стальной корпус, окрашенный порошковой краской

Температура разгонки, °С	до 400
Напряжение питания нагревательного элемента, В	15
Напряжение питания аппарата, В	220
Потребляемая мощность, Вт	1000
Габаритные размеры, мм	450 x 450 x 535
Масса, кг	20



АРН-ЛАБ-ОЗ





ТВЗ-ЛАБ-О1

ТВ3-ЛАБ-01

ГОСТ Р ЕН ИСО 2719, ГОСТ Р 54279, ГОСТ ISO 2719, ГОСТ 6356, ГОСТ 9287, ISO 2719, ASTM D 93 (методы A,B)

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ В ЗАКРЫТОМ ТИГЛЕ ПО МЕТОДУ ПЕНСКИ-МАРТЕНСА обеспечивает нагрев тигля с образцом, с заданной скоростью и перемещение испытательного пламени, в соответствии с требованиями стандартов, в автоматическом режиме. Момент вспышки устанавливается визуально.


- Микропроцессорный контроллер
- Моторизованная система перемещения испытательного пламени
- Электронный датчик температуры Pt-100
- Высокая точность поддержания скорости нагрева
- Звуковая сигнализация поджига
- Мешалка с магнитной муфтой
- Система поддержания стабильного пламени горелки
- Возможность установки двух различных скоростей нагрева в течение одного эксперимента

- Предустановленные программы испытаний:
- Стандартный метод по ГОСТ Р ЕН ИСО 2719, ГОСТ 6356;
- Определение температуры вспышкі растительных масел по ГОСТ 9287;
- Быстрый оценочный поиск температуры вспышки.
- Встроенный редактор программ
- Большой символьный ЖК-дисплей
- Универсальный входной штуцер для подачи газа
- Адаптер для подключения минибаллонов

Диапазон измерения температуры вспышки, °С	0 400
Диапазон скоростей нагрева, °С/мин	0,5 20
Поджиг	газовое пламя
Интервал поджига, °С	0,5 10
Частота вращения мешалки, об/мин	30 250
Потребляемая мощность от сети переменного тока 220 В, Вт	600
Габаритные размеры, мм	370 x 300 x 400
Масса, кг	8



ГОСТ Р ЕН ИСО 2719, ГОСТ Р 54279, ГОСТ ISO 2719, ГОСТ 6356, ГОСТ 9287, ISO 2719, ASTM D 93 (методы A,B и C)

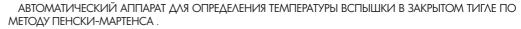

Полный автоматический контроль процесса испытания исключает ошибки оператора и снижает погрешности определения температуры вспышки



- Автоматический привод крышки тигля
- Цветной ЖК-дисплей
- Сенсорное управление
- Возможность использования газового и электрического поджига
- Система поддержания стабильного пламени газовой горелки
- Возможность установки двух скоростей нагрева в одном эксперименте
- Высокоточный термодатчик Pt-100
- Встроенный датчик давления

- Автоматический клапан подачи газа
- Предустановленные стандартные программы испытаний
- Редактор программ
- Встроенная память для хранения данных
- Подключение к ПК и сети LIMS
- Встроенный вентилятор охлаждения нагревателя
- Универсальный входной штуцер для подачи газа
- Адаптер для портативных газовых баллонов
 Подключение внешнего принтера
- Дистанционное обновление ПО

Диапазон измерения температуры вспышки,°С	0 400
Поджиг	газовое пламя, электрическая спираль
Датчик вспышки/воспламенения	термопара
Диапазон задания скоростей нагрева, °С/мин	0,5 20,0
Диапазон задания периода поджига, °С	0,5 10
Частота вращения мешалки, об/мин	30 250
Интерфейс	USB, LAN
Потребляемая мощность, Вт	600
Габаритные размеры, мм	465 x 340 x 390
Масса, кг	15



ТВЗ-ЛАБ-12

Оборудование для контроля качества нефтепродуктов АППАРАТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ



ТВО-ЛАБ-01

FOCT 4333, ISO 2592, ASTM D 92

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ ПО МЕТОДУ КЛИВЛЕНДА обеспечивает нагрев тигля с образцом, с заданной скоростью и перемещение испытательного пламени, в соответствии с требованиями стандартов, в автоматическом режиме. Момент вспышки устанавливается визуально.

- Микропроцессорный контроллер
- Моторизованная система перемещения испытательного пламени
- Электронный датчик температуры Pt-100
- Высокая точность поддержания скорости нагрева
- •Звуковая сигнализация поджига
- Система поддержания стабильного пламени горелки
- Большой символьный ЖК-дисплей
- Возможность установки двух различных

скоростей нагрева в течение одного эксперимента

- Предустановленные программы:
 - Стандартный метод по ГОСТ 4333
 - Быстрый оценочный поиск температуры вспышки.
- Редактор программ испытаний
- Универсальный входной штуцер для подачи газа
- Адаптер для подключения мини-баллонов



ТВО-ЛАБ-О1

Диапазон измерения температуры вспышки, °С	0 400
Диапазон скоростей нагрева, °С/мин	0,5 20
Поджиг	газовое пламя
Интервал поджига, °С	0,5 10
Потребляемая мощность от сети переменного тока 220 В, Вт	800
Габаритные размеры, мм	370x300x450
Масса, кг	14

ТВО-ЛАБ-12


FOCT 4333, ISO 2592, ASTM D 92

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ ПО МЕТОДУ КЛИВЛЕНДА.

Полный автоматический контроль процесса испытания исключает ошибки оператора и снижает погрешности определения температуры вспышки

- Полный автоматический контроль
- Цветной ЖК-дисплей
- Сенсорное управление
- Автоматические приводы газовой горелки, пламягасителя и узла датчиков
- Автоматический клапан подачи газа
- Система поддержания стабильного пламени газовой горелки
- Возможность установки двух различных скоростей нагрева в одном эксперименте
- Высокоточный термодатчик Pt-100
- Встроенный датчик давления

- Предустановленные стандартные программы испытаний
- Редактор программ
- Встроенная память для хранения данных
- Подключения к ПК и сети LIMS
- Встроенный вентилятор охлаждения нагревателя
- Универсальный входной штуцер для подачи газа
- Адаптер для портативных газовых баллонов
- Защитный экран
- Дистанционное обновление ПО
- Подключение внешнего принтера

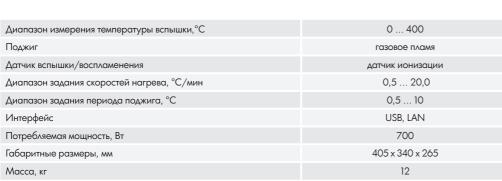



ТВО-ЛАБ-12





ΠΤΦ-ΛΑБ-14

ПТФ-ЛАБ-14

FOCT 22254, FOCT P 54269, ASTM D 6371, FOCT EN116, DIN EN 16329, IP309

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ФИЛЬТРУЕМОСТИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА НА ХОЛОДНОМ ФИЛЬТРЕ, в соответствии с ГОСТ 22254, ГОСТ Р 54269, ГОСТ EN 116, ASTM D6371, DIN EN 16329 и другими аналогичными стандартами в диапазоне температур от комнатной до -99° C.

- Встроенная охлаждающая система
- Мембранный насос с изменяемой производительностью
- Экспресс метод
- •Пошаговое и линейное охлаждение бани
- Редактор программ
- •Оптические датчики с защитой от обмерзания
- •Прецизионный датчик температуры Pt-100
- Цветной ЖК-дисплей с сенсорным управлением
- Отогрев/промывка/сушка фильтра
- Встроенная память для хранения результатов
- Подключение к ПК и сети LIMS
- Подключения внешних устройств
- Дистанционное обновление ПО
- Рекомендован для мобильных лабораторий

Объем анализируемого образца, мл	45
Погрешность измерения температуры, °С	±0,1
Диапазон измерений температуры фильтруемости, °С	от комнатной до -99
Точность поддержания температуры бани, °С	±0,5 (при температуре бани -34)
	±1 (при температуре бани -51)
	±2 (при температуре бани -67)
Создание разрежения	встроенный мембранный насос
Поддержание температуры охлаждающей бани	интегрированная охлаждающая система
Интерфейс	USB, LAN
Потребляемая мощность от сети 220, не более, Вт	300
Габаритные размеры, ШхГхВ, мм	300x450x650
Масса, не более, кг	20



ТПЗ-ЛАБ-14

ТПЗ-ЛАБ-14

ASTM D7683, ASTM D6749

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ЭКСПРЕСС АНАЛИЗА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМУТНЕНИЯ/ЗАСТЫВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ в соответствии со стандартами ASTM D6749 (определение температуры потери текучести, автоматический пневмометод), ASTM D7683 (определение температуры помутнения нефтепродуктов, метод малого объема). Параметры точности определения эквивалентны и соответствуют результатом, полученным в соответствии ASTM D2500, ASTM D 97, ГОСТ 20287, EN 23015, ISO 3015, ISO 3016, IP 15

- •Полный автоматический контроль
- Встроенный криостат, не требует внешнего охлаждения
- Редактор программ
- Высокоточный датчик температуры Pt-100
- •Цветной, сенсорный ЖК-дисплей
- •Пошаговое и линейное охлаждение до 120 °С/час
- Функция отогрева пробы
- Встроенная память
- •Система самодиагностики
- Подключение к ПК и сети LIMS
- USB-порт для подключения внешних устройств
- •Дистанционное обновление ПО
- Рекомендован для мобильных лабораторий

Объем анализируемого образца, мл	4,5
Диапазон измерений температуры, °С	-9948
Точность поддержания температуры бани, °С	±0.5
Поддержание температуры охлаждающей бани	Встроенная холодильная установка
Потребляемая мощность от сети 220, Вт	300
Интерфейс	USB, LAN
Габаритные размеры, не более, мм	300x450x600
Масса, не более, кг	20

Оборудование для контроля качества нефтепродуктов АППАРАТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХОЛОДНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ



ТПЗ-ЛАБ-22

ГОСТ 20287 (метод A), ASTM D2500, ASTM D 97, EN 23015, ISO 3015, ISO 3016, IP 15

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ КЛАССИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМУТНЕНИЯ, ТЕКУЧЕСТИ И ЗАСТЫВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ в соответствии со стандартами ГОСТ 20287 (метод A), ASTM D2500, ASTM D 97, EN 23015, ISO 3015, ISO 3016, IP 15

- Полный автоматический контроль
- Автоматическая система извлечения и поворота пробы по классическому методу
- Встроенный криостат и блок нагрева для поддержания заданной температуры бани
- Высокоточные датчики температуры Pt-100
- Высокоточная оптическая система контроля параметров испытания
- Цветной 8" ЖК-дисплей

- Сенсорное управление
- Управление скоростью охлаждения бани
- •Встроенная система отогрева пробы
- Автоматическая система защиты от перегрева
- Встроенная память для хранения результатов
- Подключение к ПК и сети LIMS
- Подключение внешнего принтера
- •Дистанционное обновление ПО

Объем анализируемого образца, мл	45
Рабочий температурный диапазон бани,°С	-95+48
Точность измерения температуры пробы, °С	±0,1
Поддержание температуры охлаждающей бани	Интегрированная система, не требующая охлаждения от внешнего контура
Потребляемая мощность от сети 220, не более, Вт	300
Интерфейс	USB, LAN
Габаритные размеры, не более, мм	300x560x550
Масса, не более, кг	25



ТПЗ-∧АБ-22

АТЗ-ЛАБ-14

ГОСТ 20287 (метод A и Б), ASTM D97, ISO 3016

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕКУЧЕСТИ И ЗАСТЫВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ в полном соответствии со стандартами ГОСТ 20287 (МЕТОД А И Б), ASTM D97, ISO 3016 и другими аналогичными в диапазоне температур до -99°C

- Встроенный криостат, не требует внешнего охлаждения
- Редактор программ
- •Два сменных измерительных блока
- Высокоточный датчик температуры Pt-100
- •Цветной, сенсорный ЖК-дисплей
- •Пошаговое и линейное охлаждение бани
- •Опция экспресс анализа для быстрого поиска
- Встроенная память
- Система самодиагностики
- •Подключение к ПК и сети LIMS
- USB-порт для подключения внешних устройств
- Дистанционное обновление ПО
- Рекомендован для мобильных лабораторий

Диапазон измерений температуры бани, °С	-9948
Точность поддержания температуры бани, °С	±0.5
Поддержание температуры охлаждающей бани	Встроенная холодильная установка
Потребляемая мощность от сети 220, Вт	300
Интерфейс	USB, LAN
Габаритные размеры, не более, мм	300x490x440
Масса, не более, кг	25



АТЗ-∧АБ-14



АТК-ЛАБ-12

АТК-ЛАБ-12

FOCT 32402, FOCT P 54280, ASTM D7153

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ (ЗАМЕРЗАНИЯ) авиационных топлив (автоматический лазерный метод), в полном соответствии с требованиями стандартов ГОСТ 32402-2013. ГОСТ Р 54280-2010. ASTM D7153.

- •Встроенная холодильная установка и блок нагрева для поддержания заданной температуры
- Оптическая система определения кристаллизации (замерзания) и непрозрачности образца
- Возможность работы с чистыми и загрязненными образцами
- Отображение графиков процесса в реальном времени
- •Прецизионный датчик температуры Pt-100
- Информативный, цветной ЖК-дисплей с сенсорным управлением
- Встроенная память для хранения экспериментальных данных
- Подключение к ПК по сетевому протоколу (LIMS)
- •Подключение к локальному/сетевому принтеру
- •Дистанционное обновление ПО

Диапазон определения температуры образца, °С	-8020
Точность определения температуры образца, °C	±0,1
Объем анализируемого образца, мл	10
Потребляемая мощность от сети 220, не более Вт	300
Интерфейс	USB, LAN
Габаритные размеры (ШхВхГ), не более мм	250x450x360
Масса, не более кг	15

АТП-ЛАБ-12

DIN EN 23015, ISO 3015

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОМУТНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ в соответствии со стандартами DIN EN 23015, ISO 3015. Конструкция аппарата и метод проведения анализа полностью выполняет все требования стандартов DIN EN 23015, ISO 3015



- Встроенный криостат и блок нагрева для поддержания заданной температуры бани
- Высокоточный датчик температуры Pt-100
- Цветной ЖК-дисплей
- Сенсорное управление
- Встроенная система отогрева пробы
- Автоматическая система защиты от перегрева
- Встроенная память для хранения результатов
- Подключение к ПК и сети LIMS
- Подключение внешнего принтера
- •Дистанционное обновление ПО

АТП-ЛАБ-12

Объем анализируемого образца, не более, мл	45
Диапазон измерений температуры,°С	-95+51
Точность измерения температуры пробы, °С	±0,1
Поддержание температуры охлаждающей бани	Интегрированная система, не требующая охлаждения от внешнего контура
Потребляемая мощность от сети 220, не более, Вт	250
Интерфейс	USB, LAN
Габаритные размеры, не более, мм	315x470x405
Масса, не более, кг	15



ДНП-ЛАБ-12

FOCT PEH 13016-1, FOCT 33157, ASTM D5190, ASTM D5191, IP 394.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ, создаваемого низкокипящими маловязкими нефтепродуктами, их компонентами и исходным сырьем, содержащим воздух (ASVP), и расчета эквивалентного давления сухих паров (DVPE) в полном соответствии с требованиями стандартов.

- Испытательная ячейка из нержавеющей стали
- •Прецизионный датчик температуры Pt-100
- Уникальные запорные клапаны, исключающие наличие холостого объема в камере
- Возможность уменьшения объёма вводимой пробы (опция)
- Цветной ЖК-дисплей с сенсорным управлением
- Система самодиагностики
- Встроенная память для хранения результатов
- Автоматическое управление вакуумным насосом и компрессором
- •Подключение к ПК и сети LIMS
- •Подключение внешнего принтера
- •Дистанционное обновление ПО
- Вакуумный насос и компрессор в комплекте

Объем анализируемого образца, мл	5
Объем испытательной камеры, мл	25
Температура испытания,°С	37,8
Точность поддержания температуры камеры, °С	±0.1
Диапазон измерения давления, кПа	0.1200
Точность измерения давления, кПа	±0.01
Соотношение газ/жидкость	4/1
Потребляемая мощность от сети 220, не более Вт	150
Интерфейс	USB, LAN
Габаритные размеры, не более мм	450x230x190
Масса, не более кг	15



ДНП-ЛАБ-12

ТОС-ЛАБ-02

FOCT 1567, FOCT 32404, FOCT 53714, ASTM D 381, ISO 6246

АППАРАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ФАКТИЧЕСКИХ СМОЛ В МОТОРНОМ ТОПЛИВЕ в соответствии с ГОСТ 1567, ГОСТ 32404, ГОСТ 53714, ASTM D 381, ISO 6246 в части проведения испытаний с использованием воздуха.

- Микропроцессорное управление
- Алюминиевый нагревательный блок
- Пять гнезд испарения (две пары параллельных проб и одна холостая)
- Съемные конические сопла подачи воздуха
- Два ЖК-дисплея индикации температуры и времени
- Брызгозащищенная контрольная панель
- Система звукового и светового оповещения процессов
- Непрерывный контроль расхода воздуха

Диапазон температур, °С	50 250
Точность поддержания температуры, °С	±Ì
Время выхода на температуру 162°С, не более, мин.	40
Потребляемый расход воздуха, л/мин	180±32
Напряжение, В	220
Мощность, Вт	2000
Габаритные размеры, мм	305 x 410 x 250
Масса, не более, кг	20



- Без дополнительных устройств
- В комплекте с малогабаритным мембранным компрессором, стаканами B-1-100 Simax (5 шт.), термометром TVH-4 N^2I и шлангом для подвода воздуха

Предлагаемый компрессор отличается низким уровнем шума, высокой надежностью, исключает необходимость применения дополнительных систем газоочистки и гарантированно обеспечивает необходимый расход воздуха при работе с аппаратом ТОС-ЛАБ-02



ТОС-ЛАБ-02



LOIP LT-910

LOIP LT-910

ГОСТ 33, ГОСТ 32060, ISO 3104, ASTM D 445

ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТЕЙ, в том числе нефтепродуктов по ГОСТ 33, ГОСТ 32060, ISO 3104, ASTM D 445 в диапазоне температур до $+150^{\circ}$ С. Термостат может быть использован для решения любых задач, требующих высокоточного термостатирования.


- Микропроцессорный PID-контроллер
- Цветной ЖК-дисплей
- Эффективная система перемешивания
- Рабочая ванна со стеклянными окнами
- Универсальные держатели вискозиметров
- Автоотключение при снижении уровня рабочей жидкости
- Система самодиагностики
- •Возможность калибровки и коррекции показаний внутреннего термодатчика
- •Встроенный охлаждающий змеевик
- Гнездо для контрольного термометра

Диапазон температур, °С:	
- без внешнего охлаждения	(T _{oxp} +10) 150
- с охлаждением водопроводной водой	(Т _{воды} +5) 150
- с охлаждением криостатом	0 150
Количество мест под вискозиметры	3
Рабочая глубина, мм	300
Погрешность установления заданной температуры, °C	±0,02
Погрешность поддержания температуры, °C	±0,01
Объем рабочей жидкости, л	14
Потребляемая мощность от сети 220 В, Вт	1500
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	380 x 250 x 565
Масса прибора без жидкости, кг	16



FOCT 33, ISO 3104, ASTM D 445

КРИОСТАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТЕЙ, в том числе нефтепродуктов по ГОСТ 33, ISO 3104, ASTM D 445 в диапазоне температур от -42°C до +100°C.

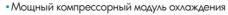

- Микропроцессорный PID-контроллер
- Цветной ЖК-дисплей
- Эффективная система перемешивания
- Рабочая ванна со стеклянным окном из многослойного стеклопакета
- •Подсветка рабочей ванны

- Универсальные держатели вискозиметров
- Автоотключение прибора при снижении уровня рабочей жидкости
- Система самодиагностики
- Возможность калибровки и коррекции показаний внутреннего термодатчика
- Гнездо для контрольного термометра

Диапазон температур, °С	-42 100
Количество мест под вискозиметры	2
Рабочая глубина, мм	300
Погрешность установления заданной температуры, °С	±0,02
Погрешность поддержания температуры, °С	±0,01
Объем рабочей жидкости, л	9,5
Потребляемая мощность от сети 220 В, Вт	2900
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	470 x 470 x 670
Масса прибора без жидкости, кг	45



LOIP LT-912




LOIP LT-810

ГОСТ Р ИСО 3675, ГОСТ 3900, ГОСТ Р 51069

ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТЕЙ по ГОСТ Р ИСО 3675, в том числе нефтепродуктов по ГОСТ 3900 и ГОСТ Р 51069 * .

- Микропроцессорный PID-контроллер
- Минимальный градиент температур
- Автоотключение прибора при снижении уровня рабочей жидкости
- Система самодиагностики
- Возможность коррекции показаний и калибровки внутреннего термодатчика
- Встроенный охлаждающий змеевик
- Гнездо для контрольного термометра

Диапазон температур, °С:	
- без внешнего охлаждения	(T _{okp} +10) 100
- с охлаждением водопроводной водой	(Т _{воды} +5) 100
- с охлаждением криостатом	0 100
Погрешность поддержания температуры, °С	±0,1
Количество тестовых мест	4 цилиндра для ареометров
Размеры цилиндров (В х Д), мм	500 x 50
Потребляемая мощность от сети 220 В, Вт	2200
Объём рабочей жидкости, л	30
Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм	560 x 250 x 715
Масса прибора без жидкости, кг	25

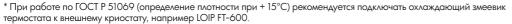



LOIP LT-810

LOIP LT-820

ГОСТ 1756, ГОСТ 31874

ТЕРМОСТАТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ БОМБ РЕЙДА при определении давления насыщенных паров нефтепродуктов по ГОСТ 1756, ГОСТ 31874.

- Микропроцессорное управление
- Эффективная система перемешивания
- Автоотключение прибора при снижении уровня рабочей жидкости
- Система самодиагностики
- Возможность коррекции показаний и калибровки внутреннего термодатчика
- Встроенный охлаждающий змеевик
- Гнездо для контрольного термометра



^{*} Бомбы Рейда в комплект не входят



LOIP LT-820



LOIP LT-830



ОПФ-ЛАБ-02



LOIP LT-840

LOIP LT-830

FOCT P EH MCO 12205

ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ДИСТИЛЛЯТНЫХ ТОПЛИВ в соответствии с ГОСТ Р ЕН ИСО 12205

- Микропроцессорный PID-контроллер
- Минимальный градиент температуры
- Автоотключение при снижении уровня жилкости
- Система самодиагностики

- Возможность коррекции и калибровки термодатчика
- Встроенный охлаждающий змеевик
- Гнездо для контрольного термометра
- Комплект стекла для проведения испытаний

Диапазон температур, °С:	
- без внешнего охлаждения	(Токр+10) 100
- с охлаждением водопроводной водой	(Тводы+5) 100
- с охлаждением водопроводной водой	0 150
Количество тестовых мест	4 ячейки
Погрешность поддержания температуры, °С	±0,1
Объем рабочей жидкости, л	30
Потребляемая мощность от сети 220 В, Вт	2200
Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	560 x 250 x 715
Масса прибора без жидкости, кг	25

КОМПЛЕКТ ОПФ-ЛАБ-02

FOCT P I/CO 10307-1, ASTM D 4870, IP 375, IP 390

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ОСАДКА В ОСТАТОЧНЫХ ЖИДКИХ ТОПЛИВАХ вязкостью 55 мм 2 /с при 100 °С и дистиллятных топливных смесях, содержащих остаточные компоненты, методом горячей фильтрации, в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 10307-1.

- Измерение осадка до 0,5 % масс
- Две латунные испытательные ячейки
- Змеевики для нагрева/охлаждения каждой ячейки
- Колба Бюхнера 500 мл в защитном кожухе
- Вакуумметр
- Термопара для определения температуры пара на входе
- Трубки для подключения в комплекте.

Состав комплекта:

Фильтровальная установка ОПФ-ЛАБ-02	1 шт
Парогенератор LOIP SG-101	1 шт
Термостат жидкостный LOIP LT-840 для подготовки проб	1 шт
Вакуумный компрессор	1 шт

LOIP LT-840

ВОДЯНАЯ БАНЯ LT-840 предназначена для проведения подготовки проб и тестов ускоренного старения.

- Микропроцессорное управление
- Светодиодный дисплей
- Система самодиагностики
- Рабочая ванна из нержавеющей стали

Диапазон задаваемых температур, °С	(Токр+10)+100
Точность поддержания температуры, °С	±0,1
Количество мест	6
Потребляемая мощность, Вт	2200
Объем рабочей жидкости, л	12
Габаритные размеры, мм	360x340x340
Масса (без жидкости), кг	15



ЛАБ-КМП-02

FOCT 6321, ISO 2160

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Комплект используется совместно с термостатами LOIP LT и прецизионными термостатирующими банями LOIP LB-200 с глубиной ванны 200 мм.

Штатив для тестовых бомб	1 шт.
Бомба тестовая	2 шт.
Штатив для пробирок LA-203	1 шт.
Пробирка П-2-16/150	20 шт.
Пробка корковая	20 шт.
Медная пластинка (40 x 10 x 2 мм) по ГОСТ 6321	50 шт.
Шкурка шлифовальная	10 листов
Эталон коррозии	1 шт.
Медная пластинка (75 x 12 x 2.5 мм) по ISO 2160	25 шт. (по заказу)



ЛАБ-КТТ

ГОСТ 20287 Метод А

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕКУЧЕСТИ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Комплект используется совместно с криостатом LOIP FT-311-80.

Пробирка плоскодонная 2 шт.	
Прокладка резиновая кольцеобразная 4 шт.	
Пробка с отверстием для термометра 2 шт.	
Диск из пробки 2 шт.	
Крышка охлаждающей бани 2 шт.	

Термометры ТИН-3 по ГОСТ 20287 необходимо заказывать дополнительно



∧АБ-КТТ

ЛАБ-КТЗ

ГОСТ 20287 метод Б

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАСТЫВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Комплект используется совместно с криостатом FT-311-80

Крышка специальной конструкции для FT-311-80	1 шт.
Штатив-держатель	2 шт.
Пробка резиновая большая	2 шт.
Пробка резиновая малая	2 шт.
Пробирка с меткой П-1-22-160	2 шт.
Пробирка П-1-42-130	2 шт.
Термометры TH-8M	2 шт.



∧АБ-КТЗ

Термостатирующее оборудование





ПРЕЦИЗИОННЫЕ ТЕРМОСТАТИРУЮЩИЕ БАНИ СЕРИИ LOIP LB-200

Прецизионные термостатирующие бани для поддержания заданной температуры объектов, размещенных в ванне прибора. Рассчитаны на работу с водой в качестве теплоносителя. Экономичная замена циркуляционным термостатам для применений, не требующих термостатирования внешнего контура.

- Микропроцессорный PID-контроллер
- Встроенная лопастная мешалка
- Яркий светодиодный дисплей
- Защищенная от брызг панель управления
- Автоотключение при снижении уровня рабочей жидкости
- Система самодиагностики
- Встроенный охлаждающий змеевик
- Рабочая ванна из нержавеющей стали
- Крышка из нержавеющей стали высотой 70 мм
- •Гнездо для контрольного термометра



LOIP LB-216

	LB-212	LB-216	LB-217	LB-224	
Диапазон температур, °С:					
- без внешнего охлаждения		(T _{okp} +10)	100		
- с охлаждением водопроводной водой		(T _{воды} +5)	100		
Погрешность поддержания температуры, не более, °C	±0,1				
Объем, л	12	16	17	24	
Размер открытой части ванны/ глубина, мм	190 x 296 /150	190 x 296 /200	360 x 296 /150	360 x 296 /200	
Мощность нагревателя, Вт		200	00		
Потребляемая мощность, не более, Вт		220	00		
Электропитание, переменный ток, В/Гц	220 /50				
Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм	355 x 335 x 350	355 x 335 x 400	532 x 335 x 350	532 x 335 x 400	
Масса, кг	12	13	15	16	

LOIP LT-920

Термостат для воспроизведения и поддержания температуры при проведении поверки термометров и датчиков температуры.

- Микропроцессорный PID-контроллер
- Цветной ЖК-дисплей
- Эффективная система перемешивания
- Рабочая ванна со стеклянными окнами
- Карусельный штатив на 15 термометров и термодатчиков
- Коррекция показаний и калибровка внутреннего термодатчика
- Автоотключение при снижении уровня рабочей жидкости
- Система самодиагностики
- Встроенный охлаждающий змеевик
- Кран для слива рабочей жидкости расположенный на корпусе ванны

Диапазон температур, °С:	
- без внешнего охлаждения	(T _{okp} +10) 150
- с охлаждением водопроводной водой	(T _{воды} +5) 150
- с охлаждением криостатом	0 150
Количество мест под термометры	15
Диаметр отверстий штатива, мм	13
Рабочая глубина, мм	300
Погрешность установления заданной температуры, не более, °C:	
- в диапазоне до 100°C	±0,01
- в диапазоне 100 150°C	±0,03
Объём рабочей жидкости, л	14
Потребляемая мощность от сети переменного тока 220 В, Вт	1500
Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм	380 x 250 x 565
Масса (без рабочей жидкости), кг	16



LOIP LT-920

TEPMOCTATЫ LOIP LT

Термостаты для точного поддержания заданной температуры объектов в собственной ванне и внешних системах с открытым или замкнутым контуром. Рассчитаны на работу с водой и неводными теплоносителями (силиконовое масло, водно-глицериновая смесь, ТОСОЛ, ПМС). Состоят из погружного термостата-циркулятора и рабочей ванны с крышкой.



LOIP LT-100

- «Эконом» версия термостатов
- Микропроцессорный PID-контроллер
- Нагнетающий насос
- Эффективное перемешивание теплоносителя
- Яркий светодиодный дисплей
- Брызгозащищенная панель управления
- Система самодиагностики
- Коррекция показаний внутреннего датчика температуры
- Охлаждающий змеевик (опция)

Диапазон температур, °С:	
- без внешнего охлаждения, °С	(T _{οκp} +10) 100
- с охлаждением водопроводной водой, °C	(T _{воды} +5) 100
Точность поддержания температуры, °C	±0,1
Циркуляционный насос:	нагнетающий
- производительность, л/мин	7,5
- тах давление, бар	0,17
Габариты, мм	123 x 190 x 325
Потребляемая мощность, Вт	2200
погреодяемая мощность, вт	2200



LOIP LT-200

Обладают всеми особенностями термостатов LT-100 и дополняются следующими:

- «Базовая» версия термостатов
- Нагревательный элемент с увеличенной площадью поверхности
- Оптимизация работы по типу теплоносителя
- Таймер
- Калибровка по трем точкам
- Охлаждающий змеевик
- Независимая защита от перегрева
- Внешний термодатчик (опция)

Диапазон температур, °С: - без внешнего охлаждения, °С (T_{arp}+10) ... 200 - с охлаждением водопроводной (T_{воды}+5) ... 200 водой, °С Точность поддержания ±0,1 температуры, °С Циркуляционный насос: нагнетающий - производительность, л/мин 10,5 - тах давление, бар 0,27 Габариты, мм 123 x 190 x325 Потребляемая мощность, Вт 2200



LOIP LT-300

Обладают всеми особенностями термостатов LT-200 и дополняются следующими:

- Производительный двухкамерный нагнетающе-всасывающий циркуляционный насос
- Информативный цветной ЖК-дисплей
- Регулировка скорости нагрева

Диапазон температур, °С:	
- без внешнего охлаждения, °С	(T _{οκp} +10) 150
- с охлаждением водопроводной водой, °C	(T _{воды} +5) 150
Точность поддержания температуры, °C	±0,1
Циркуляционный насос	нагнетающе- всасывающий
- производительность, л/мин	8,0
- тах давление, бар	0,25
Габариты, мм	126 x 255 x 325
Потребляемая мощность, Вт	2200
Масса, кг	5



LT-400

LOIP LT-400

Обладают всеми особенностями термостатов LT-200 и дополняются следующими:

- Программируемый терморегулятор
- •Точность поддержания температуры ±0,01°C
- Три программы нагрева по восемь шагов с возможностью задания температуры, скорости нагрева, мощности насоса и времени термостатирования, а также ручной режим с таймером
- Мощный нагнетающий циркуляционный насос с программным управлением
- Цветной ЖК-дисплей
- •Подключение к ПК
- •ПО в комплекте поставки
- Возможность подключения внешнего датчика температуры

Диапазон температур, °С:	
- без внешнего охлаждения, °С	(T _{окр} +10) 200
- с охлаждением водопроводной водой, °C	(T _{BOAM} +5) 200
Точность поддержания температуры, °С	±0,01
Циркуляционный насос:	нагнетающий, регулируемая производительность
- производительность, л/мин	6 12
- тах давление, бар	0,4
Габариты, мм	115 x 240 x 305
Потребляемая мощность, Вт	2200
Масса, кг	5

Модели термостатов доступные для заказа:

Модель	Объем ванны, л	Открытая часть ванны, мм	Глубина ванны, мм	Материал ванны	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
LOIP LT-100 - погружно	ой термостат-циркулятс	рр			123 × 190 × 325	3,3
LOIP LT-105(a)	5	120 × 150	150	нерж. сталь	180 × 335 × 370	6,5
LOIP LT-105P	5	110 × 150	150	поликарбонат	180 × 335 × 370	4,4
LOIP LT-108(a)	8	120 × 150	200	нерж. сталь	180 × 335 × 420	7,3
LOIP LT-108P	6.5	110 × 150	200	поликарбонат	180 × 335 × 420	4,5
LOIP LT-111(a,b)	11	160 × 240	200	нерж. сталь	268 × 335 × 420	10
LOIP LT-111P	11	160 × 240	200	поликарбонат	268 × 335 × 420	4,8
LOIP LT-112(a,b)	12	190 × 296	150	нерж. сталь	355 × 335 × 370	10,2
LOIP LT-116(a,b)	16	190 × 296	200	нерж. сталь	355 × 335 × 420	11,5
LOIP LT-117(a,b)	17	360 × 296	150	нерж. сталь	535 × 335 × 370	13
LOIP LT-117P	17	360 × 296	150	поликарбонат	535 × 335 × 370	5,2
LOIP LT-124(a,b)	24	360 × 296	200	нерж. сталь	535 × 335 × 420	14,2
LOIP LT-124P	24	360 × 296	200	поликарбонат	535 × 335 × 420	5,6
LOIP LT-200 - погружн	ой термостат-циркулят	ор			123 × 190 × 325	3,3
LOIP LT-205(a)	5	120 × 150	150	нерж. сталь	180 × 335 × 370	6,5
LOIP LT-208(a)	8	120 × 150	200	нерж. сталь	180 × 335 × 420	7,3
LOIP LT-211(a,b)	11	160 × 240	200	нерж. сталь	268 × 335 × 420	10
LOIP LT-212(a,b)	12	190 × 296	150	нерж. сталь	355 × 335 × 370	10,2
LOIP LT-216(a,b)	16	190 × 296	200	нерж. сталь	355 × 335 × 420	11,5
LOIP LT-217(a,b)	17	360 × 296	150	нерж. сталь	535 × 335 × 370	13
LOIP LT-224(a,b)	24	360 × 296	200	нерж. сталь	535 × 335 × 420	14,2
LOIP LT-300 - погружн	ой термостат-циркулят	ор			126 × 255 × 325	5
LOIP LT-311(a,b)	11	105 × 296	200	нерж. сталь	268 × 335 × 420	11,5
LOIP LT-316(a,b)	16	190 × 296	200	нерж. сталь	355 × 335 × 420	12,8
LOIP LT-324(a,b)	24	360 × 296	200	нерж. сталь	535 × 335 × 420	15,5
LOIP LT-400 - погружн	юй термостат-циркулят	ор			115 × 240 × 305	5
LOIP LT-405(a)	5	Ø 64	150	нерж. сталь	180 × 335 × 350	7,9
LOIP LT-408(a)	8	Ø 64	200	нерж. сталь	180 × 335 × 400	8,7
LOIP LT-411(a,b)	11	160 × 230	200	нерж. сталь	268 × 335 × 400	11,4
LOIP LT-412(a,b)	12	190 × 296	150	нерж. сталь	355 × 335 × 350	11,8
LOIP LT-416(a,b)	16	190 × 296	200	нерж. сталь	355 × 335 × 400	12,9
LOIP LT-417(a,b)	17	360 × 296	150	нерж. сталь	532 × 335 × 350	14,4
LOIP LT-424(a,b)	24	360 × 296	200	нерж. сталь	532 × 335 × 400	15,8

Рабочие ванны для термостатов выполнены методом штамповки из нержавеющей стали. Наружные корпуса изготавливаются из стали и окрашиваются термостойкой порошковой краской. Ванны надежно теплоизолированы, что позволяет свести к минимуму влияние внешних условий на процесс термостатирования. Так же поставляются термостаты с прозрачными рабочими ваннами для наблюдения за термостатируемыми объектами - исполнение "Р". Такие ванны изготавливаются из поликарбоната, предназначены для работы на температурах до +100°С и рассчитаны на использование воды в качестве теплоносителя. Термостаты с прозрачными ваннами крышками не комплектуются.

Термостаты комплектуются крышками в двух исполнениях: плоской съемной крышкой из нержавеющей стали - исполнение "а" или односкатной откидной крышкой - исполнение "b". Термостаты LT-100 и LT-200 с ваннами объемом 5-8 литров выпускаются только в исполнении "a". Термостаты LT-400 с ваннами объемом 5-8 литров вместо съемной крышки имеют небольшое окно диаметром 64 мм и применяются, главным образом, для термостатирования внешних объектов.

Прозрачная пластиковая ванна (термостат в исполнении "Р")



Плоская съемная крышка (термостат в исполнении "а")



Односкатная откидная крышка (термостат в исполнении "b")



213

ЖИДКОСТНЫЕ КРИОСТАТЫ LOIP FT

Жидкостные криостаты для лабораторных испытаний при заданной температуре объектов в собственной ванне и внешних системах в диапазонах температур от -80 до 100 С. Аппараты серии LOIP FT отличаются своей высокой надежностью и не прихотливостью в обслуживании

LOIP FT-205-25







LOIP FT-311-25	LOIP FT-216-4
----------------	---------------

Модель	FT-205-25	FT-211-25	FT-311-25	FT-216-25	FT-316-25	
Тип криостата		настольный		напольный		
Диапазон температур, °С			-25100			
Точность поддержания температуры, °C	±0,2		±O	,1		
Объем рабочей жидкости, л	6,5	1	0	1	16	
Размер окна ванны, мм	d80 190x130			248x170		
Глубина ванны, мм	200					
Тип внешнего контура	закрытый закрытый/открыты			закрытый	закрытый/открытый	
Максимальная производительность насоса, л/мин	10,5		8	10,5	8	
Давление, развиваемое насосом, бар	0,	27	0,25	0,27	0,25	
Мощность охлаждения при +20°C, Вт	500 520			6	50	
Питание В/кВт	220/3,6					
Габаритные размеры, ШхГхВ мм	320x590x465 460x665x470			450x420x915		
Масса (без рабочей жидкости), кг	20	4	.0	1	55	

- Микропроцессорное управление
- Автоматическое включение и отключение холодильного агрегата
- Мощный насос для термостатирования внешнего контура
- Система самодиагностики
- Подключения внешнего термодатчика (опция)

- Автоотключение прибора при снижении уровня рабочей жидкости
- Возможность коррекции и калибровки внутреннего термодатчика
- Эффективная система перемешивания
- Надежная теплоизоляция ванны
- Кран для слива рабочей жидкости



LOIP FT-316-25 LOIP FT-316-40




LOIP FT-311- 50 LOIP FT-311- 80



LOIP FT-600

FT-216-40	FT-316-40	FT-311-50	FT-311-80	FT-600
	напольный/циркуляционный охладитель			
-4010	00	-50150	-80100	-2540
		±0,1		±0,5
16		11		9
248x17	70	175x	135	-
200				-
закрытый закрытый/открытый				закрытый
10,5				20
0,27		0,25		0,3
770		510	0	1000
220/3,6 220/4,4				220/1,8
450x420	x915	535x555	5x1020	365x530x590
60		80)	50

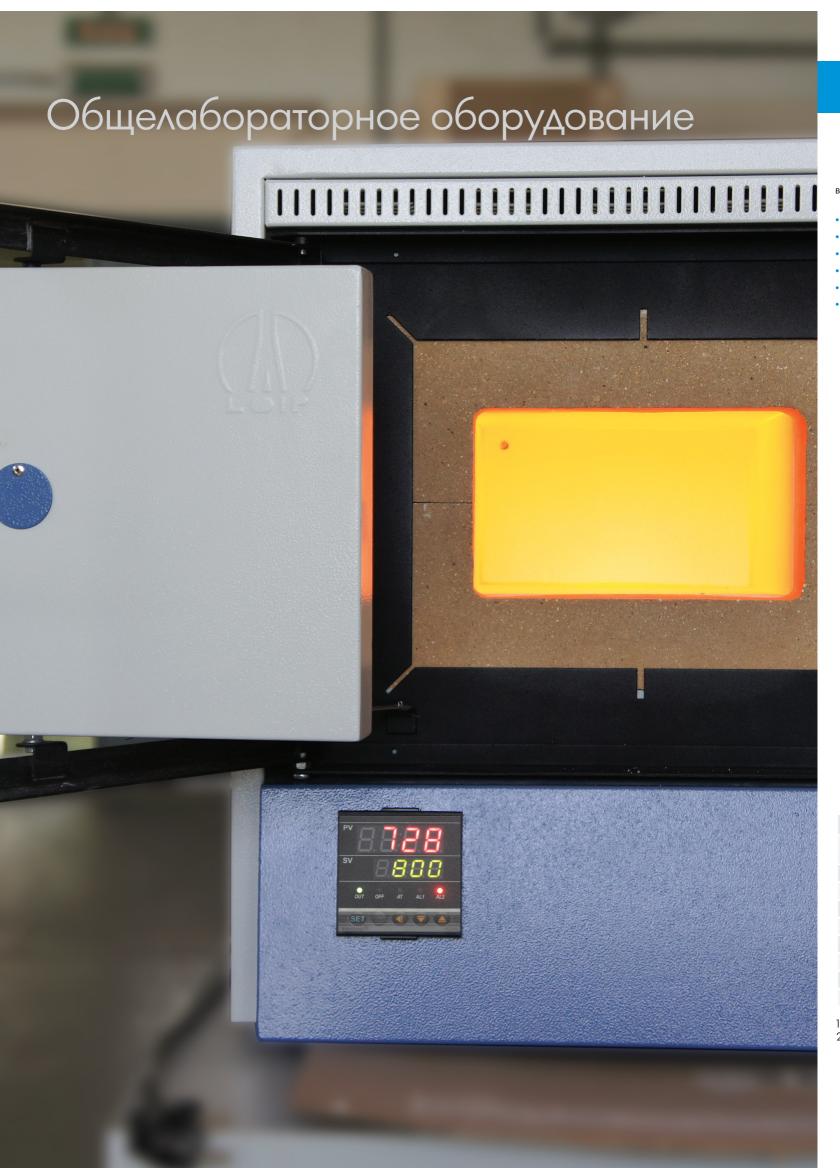

Общелабораторное оборудование ВОДЯНЫЕ БАНИ



ВОДЯНЫЕ БАНИ LOIP LB-100

ВОДЯНЫЕ БАНИ для задач нагрева образцов в диапазоне температур до +100 °C, не требующих высокой точности поддержания температуры.

- Долговечный и химически стойкий корпус из нержавеющей стали
- Система концентрических колец для размещения в ванне колб, стаканов, чашек
- Цифровой терморегулятор для точного задания температуры
- Защита от перегрева
- Индикаторы включения нагревателя и аварийного срабатывания защиты
- Кран для слива рабочей жидкости на корпусе ванны (кроме LB-140)



LOIP LB-140



LOIP LB-160/161



LOIP LB-163



LOIP LB-162



LOIP LB-164

Модель	LB-140	LB-160	LB-161	LB-162	LB-163	LB-164
Рабочее место	4 x Ø110mm	6 x Ø110мм	6 x Ø110мм+ 2 штатива	6x Ø110мм	Глубокая ванна с двускатной крышкой	3 штатива Флоринского
Диапазон рабочих температур, °С		(Токр+5) 100				
Точность поддержания температуры, °C		±l				
Рабочая часть ванны/глубина, мм	300x300x62	428x3	300x62	42	8x300x140	428x300x62
Объем рабочей жидкости	10	13	13	24	24	13
Питание, В				220		
Мощность нагревателя, Вт	1100	1600				
Габаритные размеры, мм	400 x 310 x 140	530 x 3	30 x 140	530x330x220	530x330x200	
Масса без рабочей жидкости, кг	6	7	7	9	9	9


^{1 -} Две штативные стойки d10x500 мм для надежного крепления объектов

^{2–}Три штатива Флоринского по 50 пробирок (\varnothing 14×60 мм) для проведения серологических исследований



Колбонагреватель для нагрева жидкостей в круглодонных колбах объемом 250мл, 500мл, 1000мл и 2000 мл при температурах до 400°C.

- Нагревательная камера из термостойкой слюды с запрессованными нагревательными элементами в термоизолированном кожухе
- Форма нагревательной камеры повторяет форму круглодонной колбы
- Отсутствие прямого контакта колбы с нагревательным элементом
- Плавная регулировка температуры
- •Корпус из нержавеющей стали
- Три режима работы:
 - нагрев верхней части камеры
 - нагрев нижней части камеры
 - нагрев всей камеры

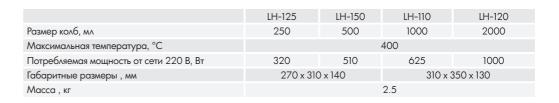



LOIP LH-150

КОЛБОНАГРЕВАТЕЛИ LOIP LH-200

Одноместные и трехместные колбонагреватели для нагрева веществ в круглодонных колбах объемом от $50\ \text{до}\ 2000\ \text{мл}$ при температурах до $600\ \text{°C}$.

- Расширенный диапазон рабочих температур
- Минимальная инерционность нагрева и охлаждения
- Высокий уровень теплового излучения
- Корпус из нержавеющей стали
- Разогрев объектов без непосредственного контакта
- Увеличенный рабочий ресурс нагревательного элемента
- Надежная термоизоляция
- Защита от пролива нагреваемой жидкости
- Компактный дизайн
- Гнездо для установки штативной стойки
- Три независимых нагревательных элемента (модель LH-253)



	LH-225	LH-250	LH-253	LH-210	
Размер колб, мл	50250	250	1000	10002000	
Количество мест	1 3			1	
Максимальная температура, °С	600				
Потребляемая мощность от сети 220 В, Вт	550	650	2000	900	
Габаритные размеры , мм	170x230x160 555x230x160 190x230			190x230x190	
Масса , кг	3 7		3		

LOIP LH-253

LOIP LH-225

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПЛИТЫ LOIP LH-300/400

Настольные нагревательные плиты LOIP LH предназначены для безопасного нагрева одновременно нескольких проб в одинаковых условиях. Отличаются равномерным распределением тепла по всей площади рабочей поверхности.

- Корпус из нержавеющей стали
- Высокая точность поддержания температуры на рабочей поверхности
- Максимально равномерный нагрев объектов
- Надежный терморегулятор с плавной регулировкой мощности
- Цифровой терморегулятор (для модели LH-404)
- •Плоский нагревательный элемент
- Минимальная инерционность нагрева и охлаждения



LOIP LH-302





LOIP LH-403





LOIP LH-405

Модель	LH-302	LH-402	LH-403	LH-404	LH-405
Тип рабочей поверхности	Хим.стойкая стеклокерамика	Алюминиевый сплав	Песчаная баня ¹	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав
Максимальная температура нагрева, °С	375				
Разница температур по платформе, не более, °C	±15				
Размеры нагревательной платформы, мм	460x320	435x315			218x315
Питание, В/кВт		220/2,	220/1,8		
Габаритные размеры, мм	480x440x130	470x453x110			285x370x110
Масса, кг		15	9		

1 - Лоток для песка (430x310x50 мм)



TR-1



TR-2



LF 5/11-G1



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР:

- PID-контроллер гарантирует поддержание температуры с высокой точностью
- Яркий светодиодный дисплей для отображения параметров и режимов работы
- Светодиодные индикаторы работы нагревателя и срабатывания защиты
- Простота управления и контроля

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР:

- PID-контроллер гарантирует поддержание температуры с высокой точностью
- Графический ЖК-дисплей с подсветкой (разрешение 128х64 точек)
- Программирование параметров многоступенчатой и циклической термообработки (3 программы по 10 шагов)
- Система оповещения при выходе текущей температуры за границы допустимого интервала
- Таймер с автоматическим отключением при завершении программы
- Независимая защита от перегрева (в сушильных шкафах)

ПЕЧИ LOIP LF

Лабораторные муфельные, трубчатые и шахтные печи предназначены для подготовки проб и проведения физико-химических анализов и исследований, термообработки (нагрев, закалка, обжиг, озоления) различных материалов при температурах 1100 - 1300°С.

- •Прочный керамический муфель
- Погрешность воспроизведения заданной температуры, не более ±10°C
- Нестабильность поддержания температуры, не более ±10°C
- Нагреватели с четырех сторон камеры
- Микропроцессорный терморегулятор
- Светодиодная индикация
- Простота управления и контроля
- Высокоэффективная теплоизоляция для минимизации потери тепла, что способствует быстрому разогреву камеры и снижает энергопотребление
- Автоматическое отключение нагрева при открывании двери
- Корпус печи изготовлен из высококачественной листовой стали и окрашен термостойкой порошковой краской
- Система вентиляции с регулируемой тягой, в моделях со встроенной вентиляционной системой
- Печи с объемом 2 л производятся с откидной дверью
- Для печей с объемом камеры 5 и 7 л предусмотрено открывание двери вбок, холодной стороной к пользователю
- Печи с объемом камеры 9 и 15 л производятся с подъемной дверью, что позволяет экономить рабочее пространство
- Опция для трубчатых печей:

Комплект для работы в газовой среде:

- кварцевая трубка
- коннекторы для подвода газа

Муфельные печи и сушильные шкафы LOIP LF выпускаются с 2 типами терморегуляторов:





МОДЕЛИ ПЕЧЕЙ LOIP LF ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА:

МОДЕЛЬ LOIP	Максимальная температура, °С	Регулятор температуры	Вытяжка	Размеры камеры, Ш*В*Г, мм	Внешние габариты, Ш*В*Г, мм	Вес, кг не более
		МУФЕЛЬ	ЬНЫЕ ПЕЧИ	1		
LF-2/11-G1	1100	цифровой	-	120*97*195	400*535*510	37
LF-2/11-G2	1100	программируемый	-	120*97*195	400*535*510	37
LF-2/13-G1	1300	цифровой	-	120*97*195	400*535*510	37
LF-2/13-G2	1300	программируемый	-	120*97*195	400*535*510	37
LF-5/11-G1	1100	цифровой	-	200*110*190	505*565*565	55
LF-5/11-G2	1100	программируемый	-	200*110*190	505*565*565	55
LF-5/11-V1	1100	цифровой	+	200*110*190	505*955*565	57
LF-5/11-V2	1100	программируемый	+	200*110*190	505*955*565	57
LF-5/13-G1	1300	цифровой	-	200*110*190	505*565*565	55
LF-5/13-G2	1300	программируемый	-	200*110*190	505*565*565	55
LF-5/13-V1	1300	цифровой	+	200*110*190	505*955*565	57
LF-5/13-V2	1300	программируемый	+	200*110*190	505*955*565	57
LF-7/11-G1	1100	цифровой	-	200*110*285	505*565*655	60
LF-7/11-G2	1100	программируемый	-	200*110*285	505*565*655	60
LF-7/11-V1	1100	цифровой	+	200*110*285	505*955*655	65
LF-7/11-V2	1100	программируемый	+	200*110*285	505*955*655	65
LF-7/13-G1	1300	цифровой	-	200*110*285	505*565*655	60
LF-7/13-G2	1300	программируемый	-	200*110*285	505*565*655	60
LF-7/13-V1	1300	цифровой	+	200*110*285	505*955*655	65
LF-7/13-V2	1300	программируемый	+	200*110*285	505*955*655	65
LF-9/11-G1	1100	цифровой	-	200*150*290	525*625*620	78
LF-9/11-G2	1100	программируемый	-	200*150*290	525*625*620	78
LF-9/11-V1	1100	цифровой	+	200*150*290	525*1015*620	80
LF-9/11-V2	1100	программируемый	+	200*150*290	525*1015*620	80
LF-9/13-G1	1300	цифровой	-	200*150*290	525*625*620	78
LF-9/13-G2	1300	программируемый	-	200*150*290	525*625*620	78
LF-9/13-V1	1300	цифровой	+	200*150*290	525*1015*620	80
LF-9/13-V2	1300	программируемый	+	200*150*290	525*1015*620	80
LF-15/11-G1	1100	цифровой	-	215*190*330	525*655*680	88
LF-15/11-G2	1100	программируемый	-	215*190*330	525*655*680	88
LF-15/11-V1	1100	цифровой	+	215*190*330	525*1045*680	91
LF-15/11-V2	1100	программируемый	+	215*190*330	525*1045*680	91
LF-15/13-G1	1300	цифровой	-	215*190*330	525*655*680	88
LF-15/13-G2	1300	программируемый	-	215*190*330	525*655*680	88
LF-15/13-V1	1300	цифровой	+	215*190*330	525*1045*680	91
LF-15/13-V2	1300	программируемый	+	215*190*330	525*1045*680	91
		ТРУБЧА	ТЫЕ ПЕЧИ			
LF-20/250-1200	1200	цифровой	-	ø 20x250	360x315x400	19
LF-50/500-1200	1200	цифровой	-	ø 50x500	620x335x405	25
		ШАХТІ	НАЯ ПЕЧЬ			
LF-70/13-G1	1300	цифровой	-	410x440x410	800x965x885	220



LOIP LF 25/350-VS1

СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ LOIP LF

Сушильные шкафы для нагрева, высушивания и тепловой обработки материалов.

- Микропроцессорный PID-контроллер
- Максимальная температура нагрева 300 и 350°C
- Четырехсторонний нагрев
- Рабочая камера из высококачественной нержавеющей стали , перфорированные полки для образцов в комплекте поставки
- Модели с встроенным вентилятором
- Независимая система защиты от перегрева с отдельным термодатчиком *
- Два типа терморегуляторов (см. стр. 23)
- Корпус из высококачественной листовой стали окрашен термостойкой порошковой краской
- Высокоэффективная теплоизоляция корпуса
- Надежный механизм закрытия двери
- Система оповещения при выходе текущей температуры за границы допустимого интервала
- Таймер со звуковым оповещением для автоматического отключения нагрева по истечении заданного времени *
- Простота управления и контроля
- * только для версий с программируемым контроллером

Диапазон задаваемых температур, °С - для моделей с объемом рабочей камеры до 120 л - для моделей с объемом рабочей камеры от 120 л	+50+350 +50+300
Точность воспроизведения заданной температуры, °С - для моделей с встроенным вентилятором - для моделей с естественной конвекцией	±3 (±5*) ±5
Точность поддержание температуры, °С - для моделей с встроенным вентилятором - для моделей с естественной конвекцией	±1 (±5*) ±2
Время разогрева до максимальной температуры, мин для моделей с объемом рабочей камеры до 120 л - для моделей с объемом рабочей камеры от 120 л	45 60


^{*} для модели LOIP LF-240/300-VS1



МОДЕЛИ СУШИЛЬНЫХ ШКАФОВ LOIP LF ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА:

МОДЕЛЬ LOIP	Макс. температура, °C	Вентилятор	Материал камеры	Регулятор	Кол-во полок*	Размеры камеры, Ш*В*Г, мм	Внешние габариты, Ш*В*Г, мм	Вес, кг не более	Мощность, Вт
LF-25/350-GS1	350	-	нерж. сталь	базовый	1/5	250*310*295	595*495*555	29	1200
LF-25/350-VS1	350	+	нерж. сталь	базовый	1/5	250*275*250	595*495*565	34	1200
LF-25/350-VS2	350	+	нерж. сталь	програм.	1/5	250*275*250	595*495*565	34	1200
LF-60/350-GS1	350	-	нерж. сталь	базовый	2/6	340*400*415	685*580*670	41	2200
LF-60/350-VS1	350	+	нерж. сталь	базовый	2/6	340*365*370	685*580*680	46	2200
LF-60/350-VS2	350	+	нерж. сталь	програм.	2/6	340*365*370	685*580*680	46	2200
LF-120/300-GS1	300	-	нерж. сталь	базовый	2/8	440*500*475	785*680*735	55	2200
LF-120/300-VS1	300	+	нерж. сталь	базовый	2/8	440*465*430	785*680*745	60	2200
LF-120/300-VS2	300	+	нерж. сталь	програм.	2/8	440*465*430	785*680*745	60	2200
LF-240/300-VS1	300	+	нерж. сталь	базовый	3/20	770*565*430	1200*930*750	125	5000

 $^{^{*}}$ количество полок: стандартная комплектация/максимальная

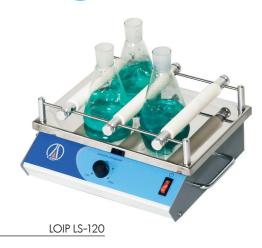

ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА LOIP LS

Интеллектуальные лабораторные шейкеры для перемешивания жидкостей в нескольких сосудах.

- •Плавная регулировка параметров
- Энкодерные регуляторы
- •Платформы из полированной нержавеющей стали
- •Прижимные валики для крепления емкостей фиксируются на направляющих в любом положении



LOIP LS-210



LOIP LS-110



LOIP LS-220


Модель	LS-110	LS-120	LS-210	LS-211	LS-220	LS-221
Тип движения	орбитальный	возвратно- поступательный	орбитальный	орбитальный	орбитальный	орбитальный
Частота колебания платформы, мин-1	50-200	30-250	40-300	40-300	20-990	20-500
Амплитуда смещения платформы, мм	20	10	30	30	5	10
Максимальная нагрузка на платформу, кг	10	2	20	20	8	8
Таймер с оповещением окончания цикла (время отображается в ч, мин, с)	нет	нет	О 8 ч	О 8 ч	О 8 ч	О 8 ч
Потребляемая мощность, Вт	300	50	200	200	80	80
Полезный размер платформы, мм	430 x 270	310x 170	440 x 380	440 х 380 (2 шт.)	300 x 220	300 x 220
Габаритные размеры с учетом смещения платформы, ШхВхГ мм	470 x 420 x 260	360 x 300 x 200	520 x 230 x 510	520 x 560 x 510	365 x 200 x 320	370 x 320 x 320
Масса, кг	25	9	32	37	18	18
Нагрев платформы	есть (0-100°С)	нет	нет	нет	нет	нет
Держатели делительных воронок	есть	есть	опция	есть	опция	опция
Двухуровневая загрузка	нет	нет	нет	Да	нет	нет
Защита от перегрузки платформы	нет	нет	да	да	да	да



ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ HACOC-ДОЗАТОР LOIP LS-301

Одноканальный лабораторный перистальтический насос-дозатор для перекачивания и дозирования жидкостей

- Возможность работы с высокочистыми и агрессивными жидкостями
- Микропроцессорное управление
- Надежный шаговый двигатель для точного поддержания заданной частоты вращения
- Три режима работы:
 - промывка,
 - непрерывная работа,
 - циклическое дозирование
- Электронный таймер для задания времени перекачивания
- Удобная система крепления шланга

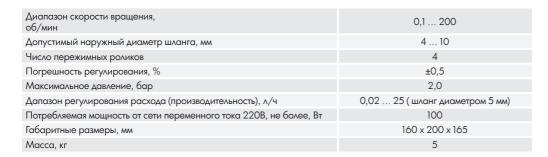



LOIP LS-301

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АКВАДИСТИЛЛЯТОР LOIP LD-104


Автоматический аквадистиллятор LOIP LD-104 предназначен для получения дистиллята высокого качества методом однократной дистилляции. Полностью автоматическое управление: подача воды в испаритель и охлаждающий контур, включение/выключение нагревателя для поддержания необходимого уровня дистиллята

- Высокое качество дистиллята (проводимость не более 2,5 мкСм/см)
- Выполнен из нержавеющей стали
- Высоконадежные нагревательные элементы в оболочке из нержавеющей стали
- Автоматическая система защиты от перелива с электромагнитным клапаном подачи воды
- Защита от перегрева и блокировка нагрева при отсутствии воды
- Детектор загрязнения
- Выпускное отверстие для дегазации
- Легкосъемная крышка для быстрого доступа к испарителю и накопительному блоку
- Сливной кран испарителя
- Настольное/настенное размещение прибора
- Комплект шлангов для подключения аппарата к водопроводной сети
- Комплект адаптеров регулировки расхода воды

Производительность, л/ч	4
Объем бака-накопителя, л	8
Расход воды, л/ч	54
Электропроводимость дистиллята, не более мкСм/см	2,5
Питание В/кВт	220 / 3
Габаритные размеры, мм	620x320x495
Масса, кг	22



LOIP LD-104

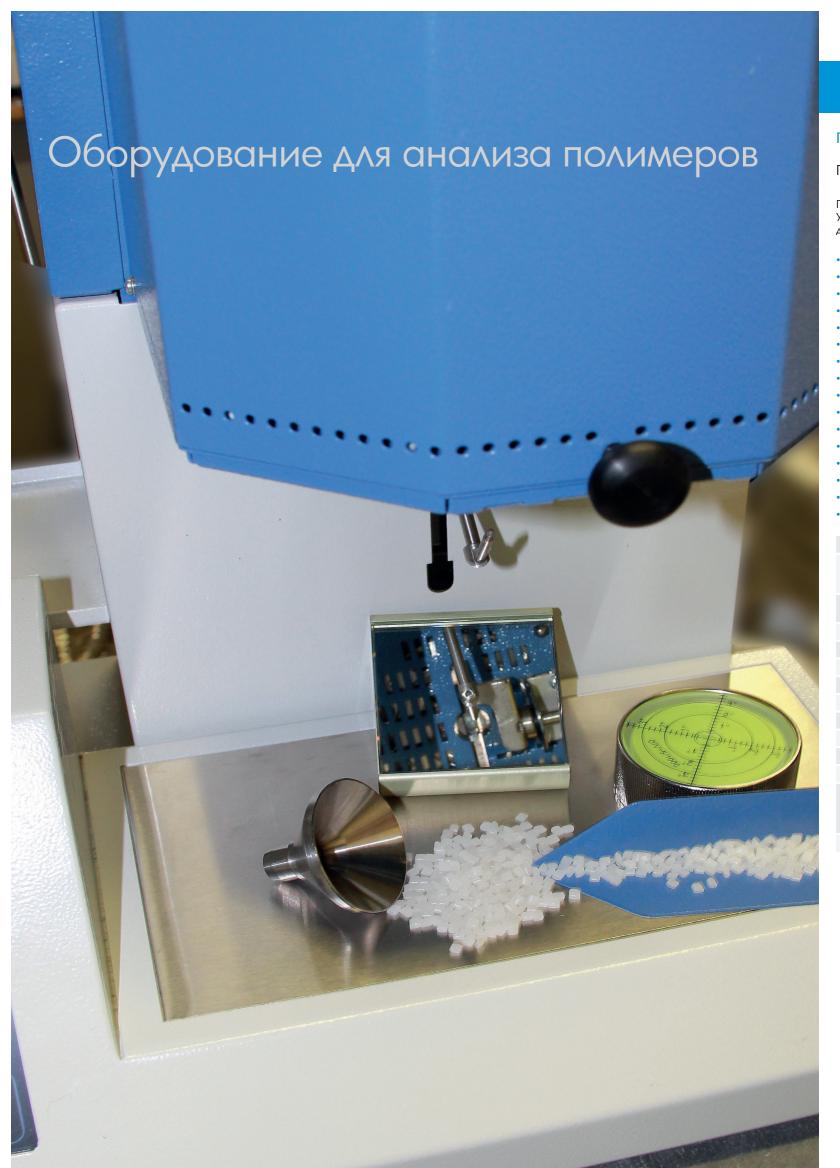



ПТР-ЛАБ-02 / ПТР-ЛАБ-11

ГОСТ 11645 (метод A), ASTM D1238 (procedure A), ISO 1133 (method A)

УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ТЕКУЧЕСТИ РАСПЛАВА ТЕРМОПЛАСТОВ в полном соответствии с требованиями ГОСТ 11645 (метод A), ASTM D1238 (procedure A), ISO 1133 (method A), а также другим аналогичными методам в диапазонах температур +50...+450°С. Установки позволяют определить термостабильность полимеров, характеризующуюся изменением во времени вязкостных свойств материалов, под действием температуры и давления.

- PID-регулирование температуры рабочей камеры
- Система самодиагностики с аварийным отключением
- Нагревательная камера высокой эффективности
- •ЖК дисплей с сенсорным управлением
- •Интегрированное программное обеспечение для обработки результатов
- Рабочая камера высокой химической стойкости из хастеллоя С-276
- Высокоэффективная теплоизоляция рабочей камеры
- Высокопрочные капилляры из карбид вольфрама
- •Поворотный нож для нарезки образца
- Магнитная заглушка капилляра
- Механизм быстрого извлечения капилляра
- Автоматическая обрезка экструдата (только для ПТР ЛАБ-11)
- Комплект приспособления для очистки камеры
- •Смотровое зеркало
- •Светодиодная полсветка зоны истечения расплава
- Возможность подключение электронных весов

Показатель текучести расплава за 10 мин, г	0,1 - 99,9
Размеры отверстия капилляра, мм	ø 2,095 ø 1,048 (опция) ø 1,180 (опция)
Набор грузов, кг	0,325 - 5 10 - 21,6 (опция)
Диапазон температур в рабочей камере, °С	+50+450
Точность поддержания температуры, °C:	
- в диапазоне 50300°C	±0,1
- в диапазоне 300350°C	±0,2
- в диапазоне 350450°C	±0,3
Дискретность задания температуры камеры, °С	1
Время выхода на рабочий режим, не более, мин	40
Интерфейс	USB, LAN
Электропитание, В/Вт	220/650
Габариты установки, мм	513×445×590 (920 - макисмальная высота при полностью загруженной камере)
Масса установки, не более кг	70





LOIP LB-230

LOIP LB-230

FOCT 13518, ASTM D1693

ВОДЯНАЯ БАНЯ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ ПОЛИЭТИЛЕНА НА СТОЙКОСТЬ К РАСТРЕСКИВАНИЮ по методам, приведенным в стандартах ГОСТ 13518 и ASTM D1693 в диапазоне температур до 100°C.

- Корпус из нержавеющей стали
- Эффективная термоизоляция
- •Съемный штатив на 50 пробирок.
- •Диаметр пробирок до 35 мм
- Равномерное распределение температуры
- Цифровой контроллер
- Независимая защита от перегрева
- •Кран для слива рабочей жидкости

A	T +5 +100
Диапазон задаваемых температур, °С	Т _{окр} +5 +100
Точность установления заданной температуры, не более	± 0,5
Точность поддержания заданной температуры, не более	± 0,5
Таймер, час	09999
Потребляемая мощность от сети 220 В, Вт	2000
Габаритные размеры (ШхВхГ), не более мм	730x440x295
Масса (без жидкости), не более кг	31



Пробирки не входят в комплект поставки, заказываются дополнительно!



СПР-ЛАБ-01

ГОСТ 13518, ASTM D1693

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОБ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОЙКОСТИ ПОЛИЭТИЛЕНА К РАСТРЕСКИВАНИЮ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ по ГОСТ 13518 и ASTM D1693

- Единая платформа для нарезки и загибки образцов
- •Противоскользящее основание
- •Одновременная установка 5 образцов

Основание с рычагом	1 шт.
Надрезочный комплект с установленным лезвием	1 компл.
Комплект для сгибания образцов	1 компл.
Держатель для образцов	2 шт.
Стойка микрометра	1 шт.
Запасное лезвие	1 шт.
Микрометр индикаторный	1 шт.





СПР -ЛАБ-01

НПП-ЛАБ

ASTM D1895 (метод A, B), ГОСТ 25139, ISO 6186, ГОСТ 11035, ISO R 60

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТИ

Данные комплекты применяется для выполнения испытаний пластмассовых материалов в виде мелких гранул или порошка.

- Воронка из дюралюминия
- •Стальной измерительный цилиндр
- Поворотный затворный диск
- Штатив с держателем

	ΗΠΠ-ΛΑБ-101	НПП-ЛАБ-102	НПП-ЛАБ-103
Методы	ASTM D1895 метод A, ГОСТ 25139, ISO 6186	ASTM D1895 метод В	ΓΟCT 11035, ISO R 60
Параметры воронки			
Внутренний диаметр широкой части, мм	93	127	56
Внутренний диаметр узкой части, мм	9,5	25,4	33
Высота, мм	114	230	115
Параметры измерительного цилиндра			
Объем, см ³	100	400	100



ΗΠΠ-ΛΑБ-101





LOIP LK-100

УНИВЕРСАЛЬНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ РАЗЛОЖЕНИЯ ПО КЬЕЛЬДАЛЮ предназначена для подготовки проб методом быстрого инфракрасного разложения для анализа содержания азота в органических соединениях по методу Кьельдаля. Установка может работать с самым широким спектром образцов. Время разложения предельно сокращено благодаря минимальной инерционности нагрева и охлаждения.

- •Программное управление (4 программы по 10 шагов)
- •LED-дисплеи для отображения параметров программ
- Брызгозащищенная контрольная панель
- •Звуковая сигнализация
- Инфракрасная нагревательная система
- Нагревательные элементы в оболочке из нержавеющей стали
- Камера нагревателя из полированной нержавеющей стали
- Выпускной коллектор
- Эргономичный дизайн
- •Сливное отверстие в рабочей камере нагревателя

Максимальная мощность нагрева, Вт	1500
Рабочий объем реакторов, мл	250
Количество реакторов	6
Потребляемая мощность от сети 220 В, Вт	1550
Габаритные размеры, мм	430 x 490 x 750
Масса прибора без жидкости, кг	25



LOIP LK-100

LOIP LK-500

АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ДИСТИЛЛЯЦИИ ПО КЬЕЛЬДАЛЮ предназначена для отгонки с водяным паром продуктов разложения при определении азота в органических соединениях по методу Кьельдаля. Установка может применяться для автоматической отгонки с водяным паром различных веществ, например спиртов и летучих кислот.

- •Программное управление
- Десять пользовательских программ дистилляции с возможностью задания объема реагента, времени реакции, мощности пара и времени дистилляции
- Автоматическая подготовка пара и регулировка мощности парового генератора
- Автоматическое добавление раствора
- •Корпус из нержавеющей стали
- Рабочая камера из полипропилена и прозрачная пластиковая дверца
- Информативный графический дисплей и энкодерный переключатель
- Интуитивно понятное меню
- Возможность изменения времени дистилляции во время работы
- Система самодиагностики
- •Спящий режим
- Калибровка системы подачи реагента
- •Датчик наличия пробирки с пробой
- Капиллярный термопредохранитель
- Клапан избыточного пара
- Автоматический клапан системы охлаждения
- Канистры с датчиками уровня (опция)

Диапазон задания объёма реагента, мл	0 - 200
Диапазон задания времени реакции и дистилляции, мин	0 - 60
Диапазон задания мощности пара, %	20 - 100
Среднее время дистилляции образца, мин	2 - 4
Потребление воды на охлаждение, л/мин	5
Потребляемая мощность от сети 220 В, Вт	2200
The personal meditions of confidence of the personal meditions of confidence of the personal meditions of the personal medition meditions of the personal medition meditions of the personal medition meditions of the personal meditions of the personal me	



LOIP LK-500



ТЕРМОСТАТИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ



LA-201 Штатив пробирок. 33 места; диаметр отверстий: 17 мм; глубина погружения: 150 мм LA-202 Штатив для пробирок. мест; диаметр отверстий: 22 мм; глубина погружения: 150 мм



LA-209 Штатив для бутирометров 11 мест; глубина погружения: 200 мм



LA-210 Кольцо-утяжелитель. Диаметр: 45 мм, масса: 0,15 кг LA-211 Кольцо-утяжелитель. Диаметр: 70 мм, масса: 0,2 кг LA-212 Кольцо-утяжелитель. Диаметр: 100 мм, масса: 0,3 кг



LA-203 Штатив для пробирок. 33 места; диаметр отверстий: 17 мм; глубина погружения: 200 мм LA-204 Штатив для пробирок. 27 мест; диаметр отверстий: 22 мм; глубина погружения: 200 мм LA-208 Штатив для пробирок 15 мест; диаметр отверстий: 22 мм; глубина погружения: 200 мм



LA-220 Устройство подъема-опускания образцов. объём ванны 17 и 24 л; глубина погружения: 200 мм LA-221





Погружной охладитель LA-250



LOIP LA-501 Датчик температуры погружной



LOIP LA-502 Датчик температуры проточный




LA-230 Охлаждающий теплообменник для LT-100



Шланг с термоизоляцией для внешнего криостатов/термостатов +200°С) упак. (2 шт. по 1,5 м)



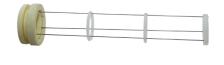

Шланг с термоизоляцией для внешнего контура [А-90] Штатив для измерения плотности криостатов/термостатов (-80...+200°С) упак. (2 шт. по 1,5 м)



СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ И МУФЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ LOIP LF



Полка к шкафу сушильному LOIP LF, нержавеющая сталь (уточняйте модель при заказе)



Плита подовая для муфельных печей LOIP LF (уточняйте модель при заказе)



Поддон к шкафу сушильному LOIP LF, нержавеющая сталь (уточняйте модель при заказе)

КОЛБОНАГРЕВАТЕЛИ LOIP LH



LA-140 Штативная стойка для колбонагревателей серии LH 200 (d 10x660)



LA-130 Узел крепления к штативной стойке



LA-120 Держатель четырехпальцевый (с узлом крепления)



LA-121 Держатель универсальный (с узлом крепления); Dmax=35 мм



LA-122 Держатель универсальный (с узлом крепления); Dmax=45 мм





Адрес офиса:

0500012 Казахстан,

г. Алматы, ул. Толе-би 83, 6 этаж, 5 офис

тел: 8-(727)-244-93-21/22/23

+7 777-715-88-30/32

e-mail: info@labi.kz

www.labi.kz